


OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Alteração na Fixação da Carenagem do Assento Logic

Informamos que a partir de 8 de abril de 2014, a fixação da **carenagem do assento (A)** do equipamento Logic passou a utilizar **parafuso philips (C)**, substituindo o **parafuso sextavado interno ou allen (B)**.

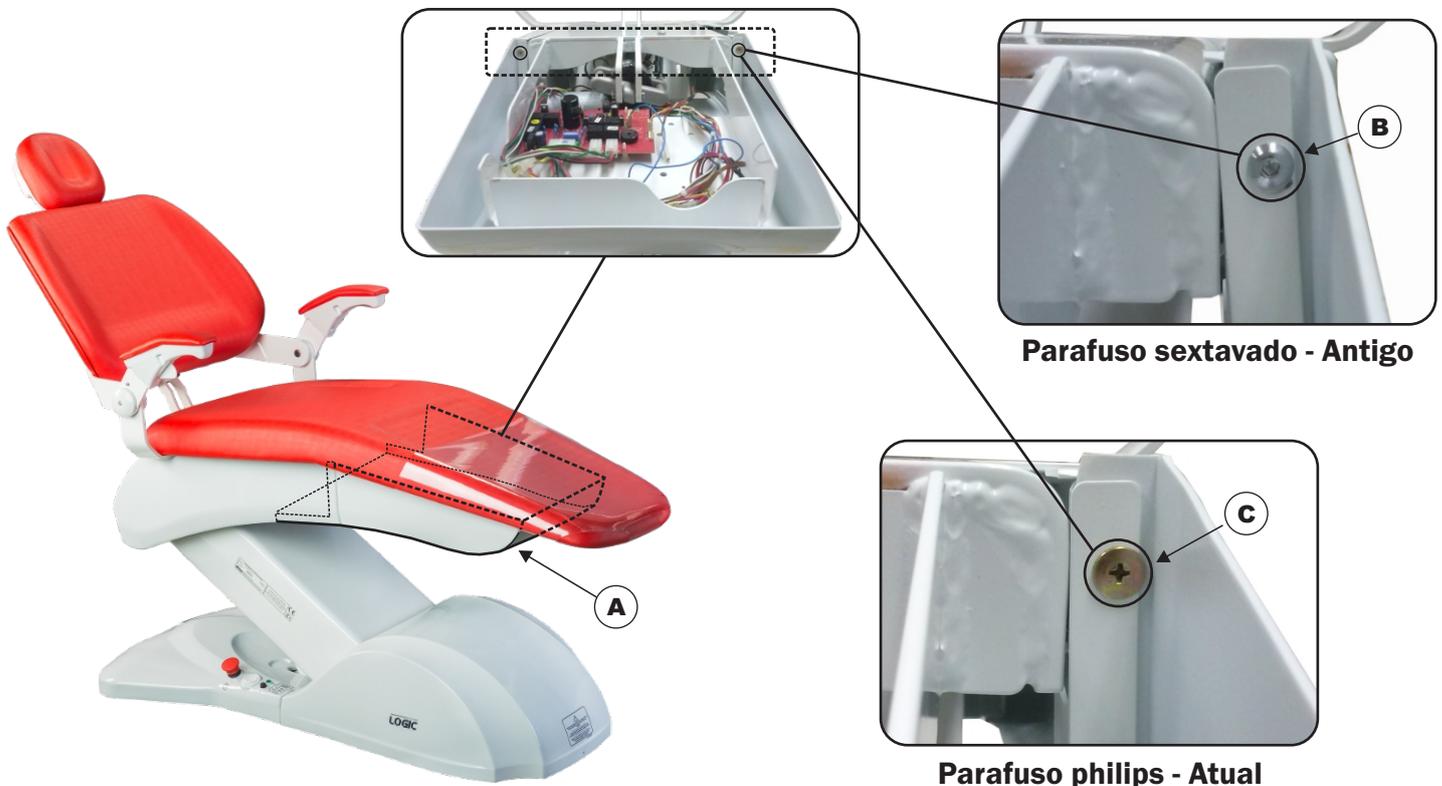

- A 8102007 - Carenagem do assento**
- B 8001066 - Parafuso sextavado interno cabeça abaulada M5 x 12 - Niquelado**
- A 5200229 - Parafuso philips cabeça larga M5 x 15**

A implantação do parafuso philips tornou mais fácil a remoção da carenagem do assento.

É importante ressaltar que esta alteração é resultado da comunicação entre a Rede de Assistência Técnica Credenciada e a Olsen.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.