

OLSEN TEC


www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Kit de Fixação

A partir da segunda quinzena de setembro de 2014, o kit para fixação dos equipamentos odontológicos no piso será enviado apenas com as buchas plásticas, com exceção do Siena com base longa.

Equipamentos Logic e Infinity recebem 7 parafusos de 10mm, para fixação da cadeira e equipo nas embalagens. Já os equipamentos Siena e Sprint recebem 4 parafusos de 10mm para fixação da cadeira na embalagem. Estes parafusos devem ser removidos pelo técnico e utilizados para fixação da cadeira no piso.

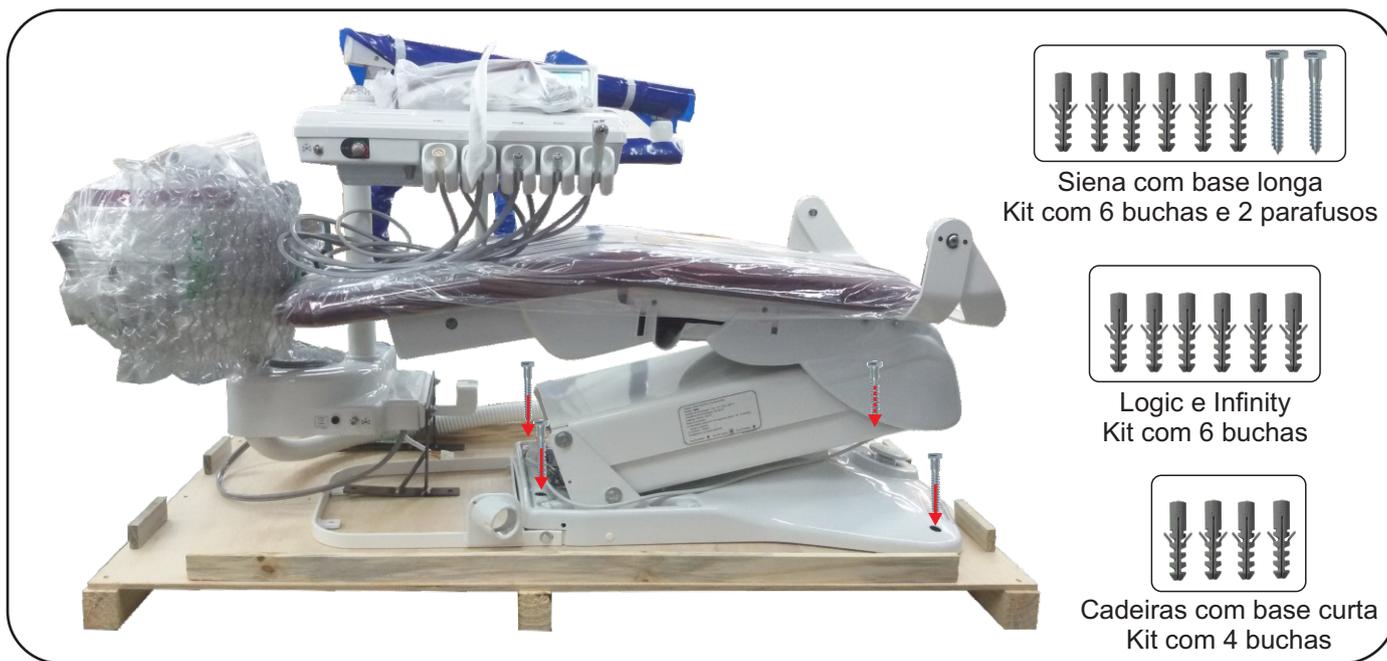

Equipamento Siena com destaque dos 4 parafusos utilizados para fixação da cadeira na embalagem.

Equipamentos Infinity e Logic receberão kits com 6 buchas plásticas de 8mm, enquanto os equipamentos com base curta receberão apenas 4 buchas plásticas também de 8mm. O Siena com a base longa receberá 6 buchas plásticas de 8 mm e 2 parafusos de 10mm, já que os parafusos do suporte do equipo não servem para fixação no piso. A caixa de conexões, para os equipamentos de base curta, continua recebendo seu próprio kit de fixação.

Este procedimento tem como objetivo evitar o descarte desnecessários de componentes.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.