


# OLSEN TEC

[www.olsen.odo.br](http://www.olsen.odo.br)

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

## Parafuso de fixação da Bucha do Motorredutor

Com o objetivo de melhoria em seus equipamentos, a Olsen modificou o modo de fixação da bucha do motorredutor, incluindo um parafuso de reforço.

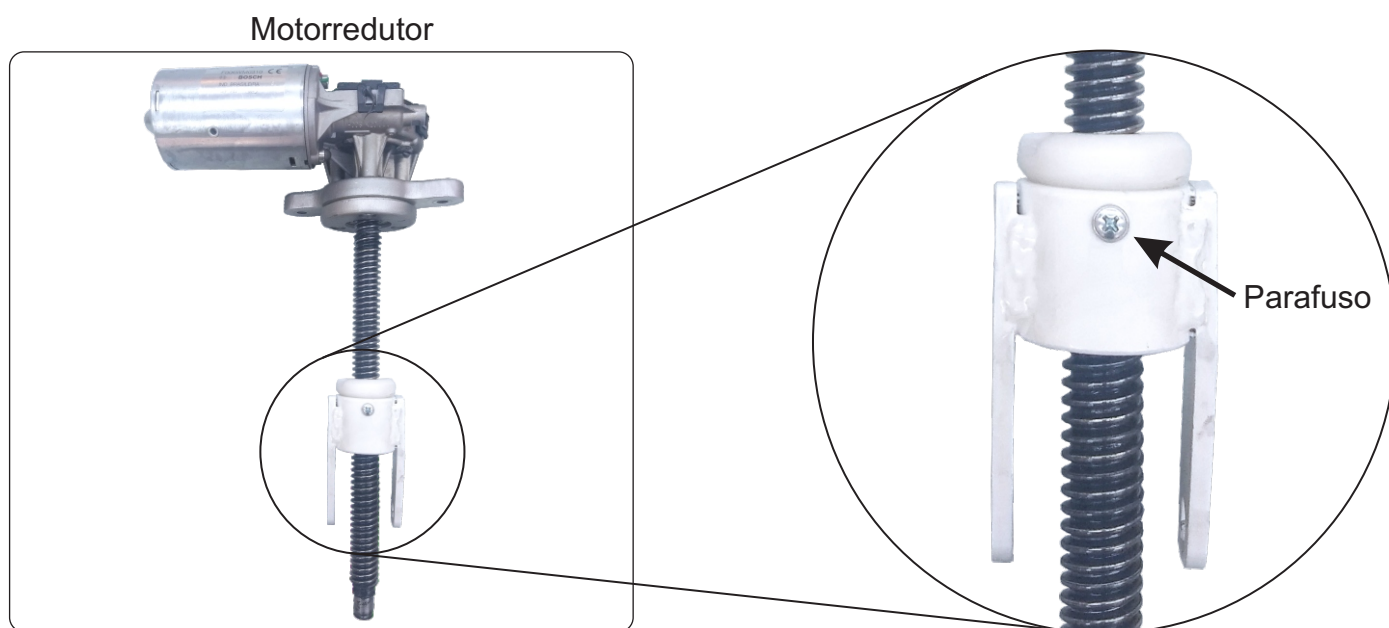

A estrutura e montagem da bucha do motorredutor continuam inalteradas, sendo ainda utilizado a cola em sua fixação. O parafuso incluso na estrutura servirá apenas como um reforço, garantindo um melhor desempenho.

Essa alteração valerá para toda linha odontológica e passará a valer a partir do número de série 10022743.

**Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.**