


OLSEN TEC

www.olsen.odo.br

Olsen Tec é um informativo exclusivo da Olsen para a rede de Assistência Técnica Credenciada, com objetivo de divulgar as mudanças nos produtos ou procedimentos, preparando os técnicos em tempo hábil para as inovações do mercado. Fique atento aos conteúdos apresentados e repasse aos demais técnicos autorizados de sua empresa.

Kit Chumbador Parabolt Para Fixação do Refletor de Teto - Nova Quantidade

Informamos que, desde o dia 18/11/2020, o Kit Chumbador Parabolt Para Fixação do Refletor de Teto (cód. 9303130) é fornecido com seis unidades de Chumbador Parabolt PBC 5/16" x 3.1/4" (cód. 5201863), com o intuito de otimizar a fixação do equipamento. Compõem o kit, uma unidade de Parafuso Sextavado Interno M5 x 6 mm (cód. 8002254) e uma unidade da Porca Sextavada M5 x 0,80 MA ZB (cód. 5200806). O conjunto é selado em embalagem plástica (cód. 5300114).

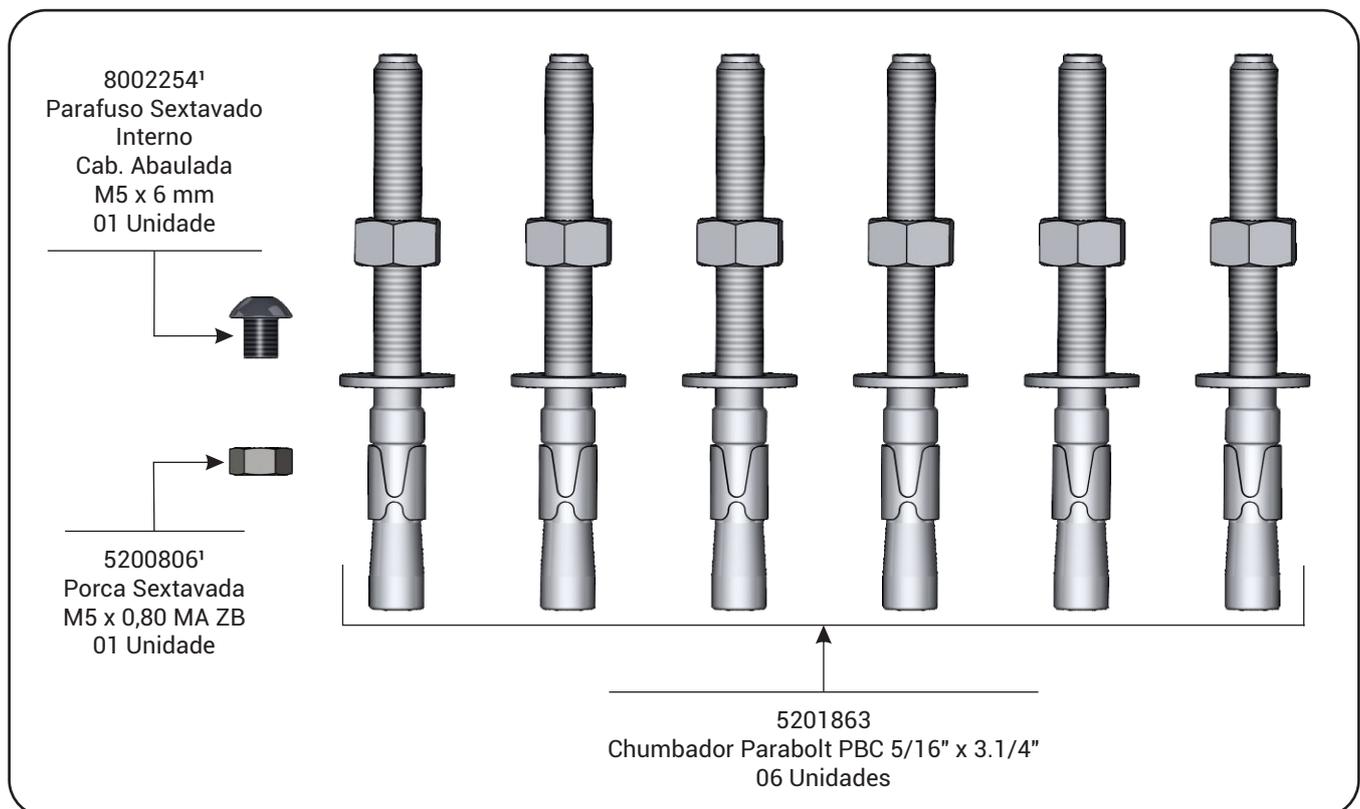

Nota 1: O Parafuso Sextavado Interno M5 x 6 mm (cód. 8002254) e a Porca Sextavada M5 x 0,80 MA ZB (cód. 5200806) tem a finalidade de fixar o braço móvel do refletor à coluna fixa.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam permanecer.

REIA 3148/20 - Revisão 00 - 24 de Julho de 2020