

SUBSTITUIÇÃO DO REBITE PELO PARAFUSO NOS SUPORTES DE PONTAS

Informamos que o rebite de repuxo (código 5201205), utilizado na fixação dos suportes de pontas, foi substituído pelo parafuso (código 5202001). Esta alteração visa melhorar a durabilidade e a estabilidade dos suportes de pontas, além de simplificar o processo de manutenção e montagem dos equipamentos.

Detalhes da Alteração:

- Componente substituído: Rebite Repuxo em Alumínio Ø3,2x12,7mm (5201205);
- Novo Componente: Parafuso Belplastic Cabeça Panela Ø4,5 x 14mm ZB (5202001);
- Modelos afetados: a substituição abrange todos os suportes de pontas dos equipamentos das linhas odontológica, médica e veterinária, localizados na mesa, unidade de água e módulos.

COMPONENTE SUBSTITUÍDO



Rebite Repuxo em Alumínio
5201205


NOVO COMPONENTE



Parafuso Belplastic Cabeça Panela
5202001

LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES SUBSTITUÍDOS

Mesa

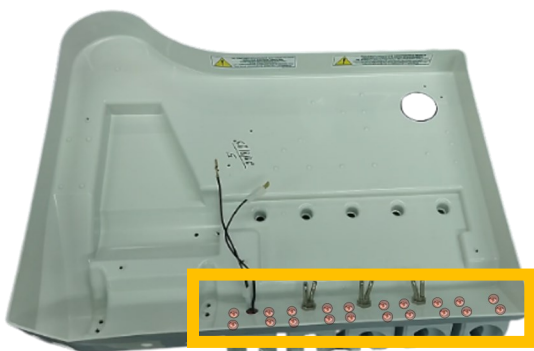

Unidade de Água



Módulo

