

Folha de Especificações

Linha Veterinária

MESA CIRÚRGICA VET MULTICARE

///Olsen Vet

Imagem meramente ilustrativa



DESTAQUES

- Elevação por base telescópica e ajuste por pedal.
- Inclinação da mesa em 0°, 10° e -10°.
- Tampo com 4 níveis de angulação 0°, 20°, 30° e 40°.
- Rotação da mesa em 360° com 16 posições.
- Base com pés niveladores antiderrapantes.
- Estrutura em aço com pintura eletrostática antibacteriana.
- Acessórios integrados para coleta e auxílio nos procedimentos.

DESCRIÇÃO

- Projetada para otimizar a rotina clínica, a Mesa Cirúrgica Vet Multicare oferece ajustes práticos que facilitam o posicionamento do animal durante os procedimentos.
- Tampo com sistema de calha permite a drenagem de líquidos, facilitando a limpeza e o escoamento durante o uso. Possui quatro níveis de angulação, 0°, 20°, 30° e 40°, ajustados por manípulos laterais.
- Ajuste de altura controlado por comando eletrônico através de pedal, proporcionando ajustes precisos e sem a necessidade de contato direto com as mãos.
- Inclinação da mesa pode ser ajustada para 0°, 10° e -10°, permitindo melhor escoamento de fluidos corporais e posicionamento do animal durante o procedimento.
- Rotação da mesa gira 360° com 16 posições distintas, ajustadas por um manípulo de trava rápida, facilitando a segurança e a precisão na fixação da posição desejada.
- A estrutura é fabricada em aço carbono com pintura eletrostática de alta durabilidade e proteção antibacteriana, garantindo maior resistência mecânica, higiene e vida útil prolongada do equipamento.
- Base com pé nivelador antiderrapante, proporcionando ajuste de nivelamento preciso em diferentes superfícies, garantindo firmeza e estabilidade da mesa durante o uso.
- Motor blindado oferece proteção contra respingos de água, aumentando a segurança e a durabilidade do equipamento.
- Acessórios integrados:
 - Suporte de Amarra: para contenção segura do animal durante os procedimentos.
 - Haste de Suporte para Soro: para administração de fluidos durante a cirurgia.
 - Calha e Balde Coletor: para recolhimento de líquidos e resíduos.
 - Placa Segmentada com Bandeja de Coleta: auxilia na contenção de fluidos, mantendo o ambiente de trabalho limpo.

5409362 R00

OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Rua Romalino João da Rosa, 11, Brejaru


Palhoça/SC - Brasil - CEP 88133-516

Fone: + 55 (48) 2106-6000

www.olsen.odo.br

www.olsen.odo.br

@olsen.ind     

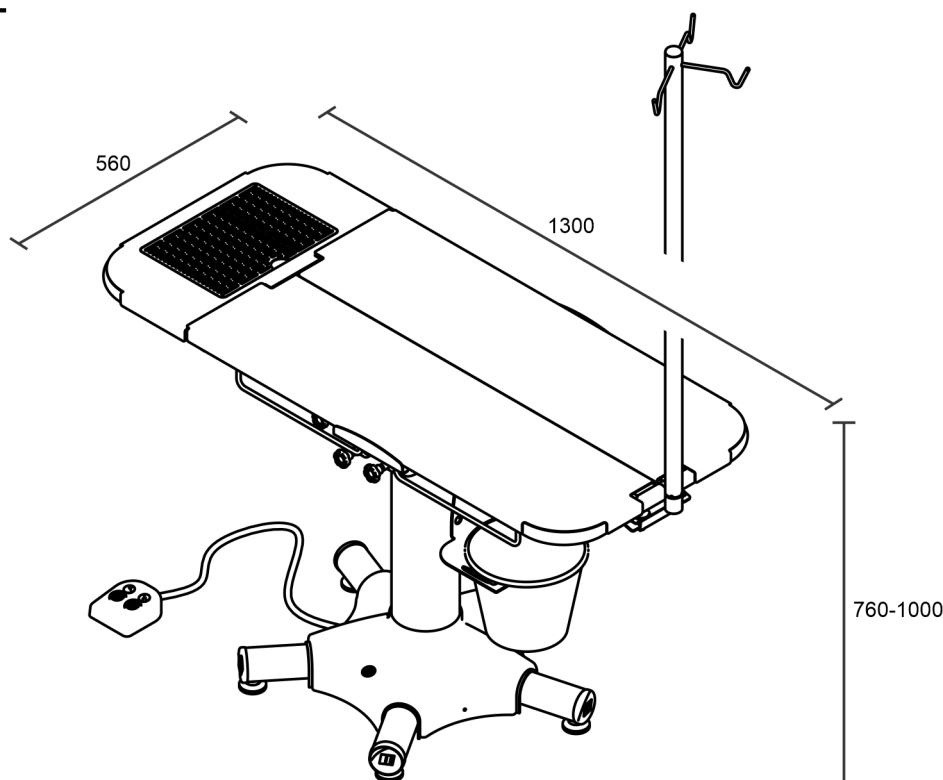

Dimensionais Produto

Comprimento	1300 mm
Largura	560 mm
Altura	760-1000 mm
Peso líquido	90 kg

Dimensionais Embalagem

Comprimento	1430 mm
Largura	750 mm
Altura	890 mm
Peso bruto	96 kg

Elétricas

Tensão	127/220 V~
Potência	100 W
Corrente máxima	0,4 A (127 V~) 0,8 A (220 V~)
Fusível de proteção	1,0 A (127 V~) 0,5 A (220 V~)
Frequência	50-60 Hz
Consumo elétrico	0,1 kW/h
Tipo de plugue	Tipo N (IEC 60906-1) 2P + T 10A 250V

Gerais

Carga máxima de trabalho	50 kg
Capacidade balde coletor	4,7 L
Capacidade calha coletora	3,1 L

CONDIÇÕES DE USO

- Equipamento destinado ao uso em ambiente clínico e cirúrgico veterinário, em áreas internas e secas.
- Deve ser operado por profissionais treinados, conforme instruções de uso.
- Não é indicado para uso em ambientes externos, áreas molhadas ou sujeitos a respingos constantes de líquidos.
- A operação deve ocorrer em locais com ventilação adequada e superfície de apoio nivelada.
- Evitar exposição prolongada à umidade, poeira excessiva ou agentes químicos corrosivos.

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

- Não requer instalação fixa ou ancoragem ao piso.
- A instalação consiste apenas no posicionamento do equipamento em superfície plana e nivelada.
- Necessita de ponto de energia elétrica compatível com a tensão do equipamento.
- Recomenda-se tomada exclusiva e aterrada, conforme normas elétricas vigentes.
- Deve ser respeitado espaço livre ao redor da mesa para operação segura e circulação da equipe.